


# Guía rápida de primer uso de INVOX Medical



**1. Arranque INVOX Medical** haciendo doble clic en el icono de su escritorio.



**2. Acceda a la aplicación introduciendo usuario y contraseña.**

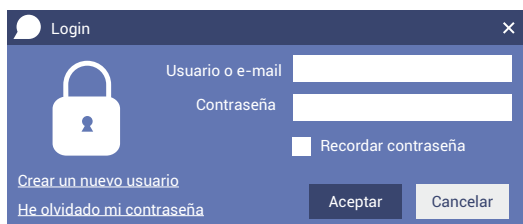


**3. Lea y acepte las condiciones legales.**

**4. Asegúrese de que su micrófono está conectado al equipo correctamente.** Para ello, compruebe que el indicador de barras se mueve al recibir sonido.



Si ve el icono del micrófono como en la siguiente imagen significa que no está bien conectado.



**5. Configure el micrófono** para que se adapte a las condiciones acústicas del entorno. Acceda al menú desplegable pulsando el icono  y haga clic sobre el botón del micrófono.




Indicaciones:

- Lea las frases que le irán apareciendo de forma automática.

- Intente recrear las condiciones de ruido normales de su entorno de trabajo.

- No es necesario pulsar ningún botón del dispositivo.

**6. Realice el entrenamiento** para que se adapte a las características específicas de su voz con el fin de conseguir la mejor tasa de acierto. Acceda al menú desplegable pulsando el icono  y haga clic sobre el botón de entrenamiento.



Indicaciones:

- Lea las frases que le irán apareciendo de forma automática, incluyendo las palabras que están escritas en MAYÚSCULAS. El entrenamiento no se puede interrumpir.

- Intente recrear la velocidad, tono, volumen y forma de pronunciar que normalmente utiliza, siendo lo más natural posible.

- No es necesario pulsar ningún botón del dispositivo.

- Si al leer una de las frases, en un par de segundos no aparece de forma automática la siguiente, vuelva a leer la frase actual. Es normal que esto suceda.

**¡Enhorabuena, ya puede trabajar con INVOX Medical!**

**7. Para comenzar a dictar** ponga el cursor donde quiera escribir e inicie dictado. Puede iniciarlo haciendo clic sobre el icono del micrófono junto al candado, con la tecla F9 de su teclado, o utilizando el comando de voz "Iniciar dictado".



*NOTA: si trabaja con un micrófono de mano puede comenzar a dictar accionando el botón central. En este tipo de micrófonos el comando de voz "Iniciar dictado" está desactivado por defecto.*

7.1 Una vez que el dictado esté activo, verá que el icono del micrófono parpadea en color rojo.



Ya puede comenzar a dictar.

**8. Puede parar el dictado** en cualquier momento mediante algunas de estas opciones: presionando el icono del micrófono junto al candado; pulsando la tecla F9; utilizando el comando de voz "Detener dictado" si trabaja con un micrófono bluetooth; o accionando el botón central de su micrófono de mano.

*NOTA: si dispone de un micrófono de mano, el comando "Detener dictado" está desactivado por defecto.*